

HIDROPORACIÓN & RADIOFRECUENCIA

ROSTRO & CUERPO



www.krlux.lu



MESOJET® es un dispositivo fabricado en Europa que permite ofrecer tratamientos para la piel de una calidad excepcional, desarrollado para responder a la creciente demanda de tratamientos antiedad en el ámbito estético. Descubra hoy las mejores tecnologías de suplementación cutánea y radiofrecuencia reunidas en esta gama de dispositivos.



POROS ATENUADOS

PIEL TONIFICADA

ARRUGAS ATENUADAS

CELULITIS ELIMINADA

LABIOS REDISEÑADOS



2 TECNOLOGÍAS - 1 DISPOSITIVO



HIDROPORACIÓN

Gracias a su tecnología de hidroporación, este dispositivo permite realizar un tratamiento completo de **rejuvenecimiento** cutáneo mediante exfoliación y **suplementación transcutánea** de principios activos. Con su pieza de mano de última generación y una amplia gama de principios activos, obtendrá resultados **antiedad** visibles, además de una **mejora en la textura y calidad de la piel**.

RADIOFRECUENCIA

Gracias a su tecnología de radiofrecuencia **monopolar y bipolar**, este dispositivo permite realizar un tratamiento de tonificación cutánea tanto para el rostro como para el cuerpo. Con sus dos piezas de mano de cerámica y sus placas corporales, se logran resultados efectivos en pieles flácidas e incluso en la celulitis. A través de un tratamiento sumamente agradable (comparable a un masaje con piedras calientes), se obtienen resultados visibles en la firmeza de la piel y en la mejora de su textura.



It's a Match!

Comparado con un tratamiento de hidroporación o radiofrecuencia por separado, la combinación de hidroporación y radiofrecuencia proporciona un resultado

30% MÁS RÁPIDO

y aumenta

50% LA CALIDAD Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO




HIDROPORACIÓN

Suplementación cutánea sin aguja


Con la ayuda de una **pieza de mano patentada**, el dispositivo **MESOJET®** propulsa a una velocidad supersónica (>200 m/s) una mezcla de aire y solución activa en forma de un chorro de microgotas, sin **NINGÚN CONTACTO** con la piel.

Una sesión **MESOJET®** consiste en un **tratamiento completo de la zona a tratar** (rostro, escote, cuerpo). Dependiendo de la inclinación de la pieza de mano y su distancia a la piel, se podrá:

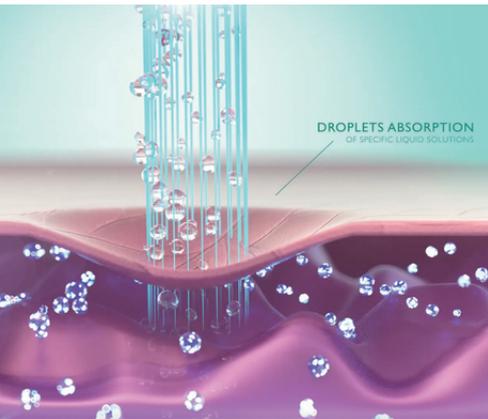

- En un primer tiempo, realizar un **drenaje linfático** para reactivar la circulación.
- Luego, en un **segundo tiempo**, exfoliar las capas superficiales de la piel y eliminar las células muertas: **Hidrodermoabrasión**.
- Y en un tercer tiempo, generar una presión estática local sobre la piel, **permitiendo que el principio activo penetre** hasta varios milímetros en el dermis: **suplementación cutánea** o **hidroporación**.

Este proceso, denominado “Baroforésis”, es el resultado de la variación de presión ejercida sobre la piel. Garantiza un acceso sin aguja a las capas profundas de la piel y facilita el aporte de nutrientes como el **ácido hialurónico**, que puede alcanzar los tejidos conectivos, o las **vitaminas A, B, C y E**, esenciales para el buen funcionamiento de las células.

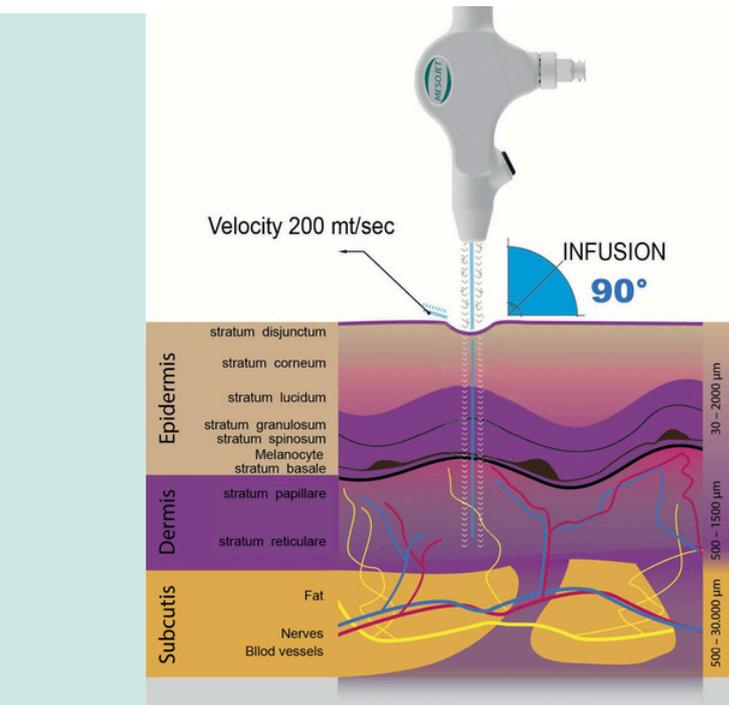

La “Baroforésis”

El chorro supersónico generará un flujo de alta presión en el punto de contacto con la piel, creando la apertura de **microcanales en la epidermis**.

La diferencia de presión entre la superficie y los tejidos más profundos provocará una **penetración profunda y una difusión transdérmica** de las sustancias biológicas.

La reducción de la presión cerrará los microcanales y **mantendrá los principios activos** de manera duradera en los tejidos, logrando **efectos fisiológicos a largo plazo**.

HIDRODERMOABRASIÓN

PEELING QUÍMICO

INFUSIÓN TRANSDÉRMICA

BIO-REJUVENECIMIENTO



UNA AMPLIA GAMA DE PRINCIPIOS ACTIVOS adaptada a la diversidad cutánea.

Según el protocolo y/o el resultado deseado, hay disponibles diferentes fórmulas de principios activos.

Una de las principales características de **MESOJET®** es su capacidad para transmitir en profundidad sustancias esenciales para el rejuvenecimiento de la piel. Estas fórmulas están enriquecidas con **nutrientes, vitaminas y minerales**, indispensables para la elasticidad, luminosidad, rejuvenecimiento y belleza de la piel.

El profesional dispone de productos de alta concentración, específicamente diseñados para ser administrados a través de la pieza de mano PREMIUM de **MESOJET®**. Enriquecidas con los activos antiedad más potentes del mercado, las soluciones '**Jet Solution**' garantizan resultados específicos según los protocolos de tratamiento.

Los consumibles que se le ofrecen le permiten realizar todos los protocolos **MESOJET®**: antiedad para rostro y cuerpo, acné, cuperosis, despigmentación y cuidado del cuero cabelludo.



UNA PIEZA DE MANO

Adaptada a los protocolos de tratamiento

LA PIEZA DE MANO PREMIUM

Permite realizar todos los tratamientos:


- Mejor micronización: partículas más finas y menos aire, manteniendo la misma presión para obtener mejores resultados
- Chorro más homogéneo
- Potencia ajustable
- No se obstruye ni pierde eficacia con el uso
- Sin elementos metálicos cortantes = sin riesgo de lesión
- Limpieza rápida y fácil de la pieza de mano
- Menos desperdicio de plástico




FLUJO AJUSTABLE MANUALMENTE



FIN

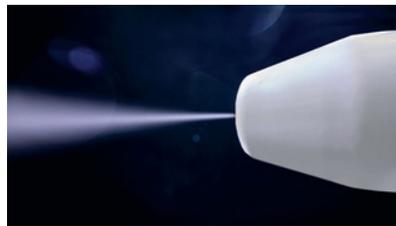

MEDIO

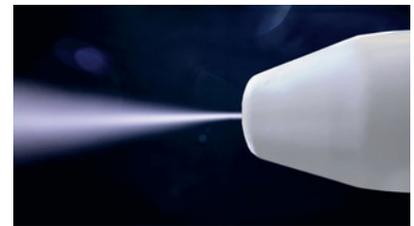

FUERTE

PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO

En varias etapas



ETAPA
01

DRENAJE LINFÁTICO

Un masaje agradable y relajante, útil para desintoxicar la piel y estimular la microcirculación

ETAPA
02

HIDRO-DERMOABRASIÓN

Eliminación de las células muertas, preparando la piel para recibir los nutrientes durante la fase de hidroporación.

ETAPA
03

HIDROPORACIÓN

Permite una difusión eficaz y profunda de los ingredientes activos en la piel.

ETAPA
04

BOOSTER INFUSIÓN

Etapla opcional, que puede incluirse para mejorar y prolongar el resultado del tratamiento.



LA RADIOFRECUENCIA

Al servicio del antienvjecimiento

La radiofrecuencia de **MESOJET®** ha sido desarrollada con ajustes específicos que generan un **calentamiento controlado de la bicapa lipídica**, permitiendo que la barrera cutánea se vuelva más permeable a las sustancias lipolíticas e hidrofílicas.

Tratada de esta manera, la piel es capaz de **absorber mucho mejor los principios activos** que el profesional elige administrar.



LAS INDICACIONES


- 1 El dispositivo **MESOJET®** proporciona un tratamiento agradable e indoloro, emitiendo un calor suave gracias a su radiofrecuencia. De este modo, se pueden tratar:
 - Las arrugas y líneas de expresión (antienvjecimiento)
 - Las estrías y cicatrices
 - La eliminación de la piel de naranja
 - El reafirmamiento de la piel
 - La mejora de la textura cutánea
- 2 Utilizado en el rostro, **MESOJET®** permite redibujar los **contornos y mejorar la textura cutánea**. El calor inducido por la onda genera un **efecto tensor** instantáneo y duradero, devolviendo a la piel un aspecto visiblemente más joven.
- 3 Con sus **91 modos de tratamiento predefinidos** para rostro y cuerpo, y sus **2 piezas de mano** de cerámica, trate un máximo de indicaciones para obtener resultados visibles y duraderos.



LAS PIEZAS DE MANO

El dispositivo **MESOJET®** cuenta con **dos piezas de mano de cerámica**.


Ergonómicas, ligeras y fáciles de usar, permiten tratar el rostro o el cuerpo con una conductividad óptima, garantizando sesiones **seguras, cómodas y eficaces**.

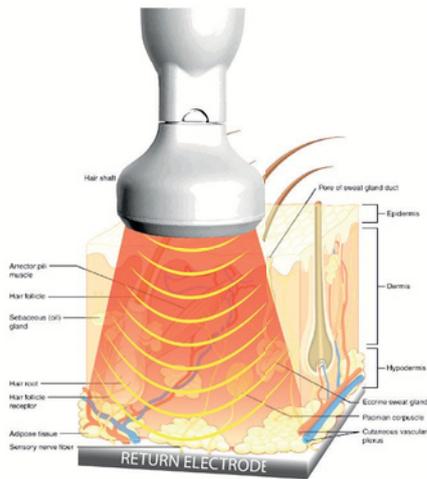

MONOPOLAR CAPACITIVA

Para el tratamiento del **CUERPO**
(Potencia máx. 1MHz)

- Flacidez cutánea
- Celulitis y acumulaciones de grasa
- Estrías y cicatrices

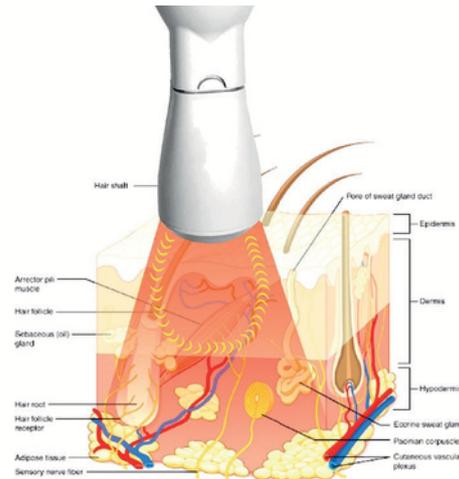

BIPOLAR

Para el tratamiento del **ROSTRO**
(Potencia máx. 1MHz)

- Flacidez cutánea
- Reafirmamiento de la piel
- Antiedad (antiarrugas)
- Mejora de la textura de la piel

REDENSHAPE® la crema conductora RF EL IMPRESCINDIBLE PARA UN TRATAMIENTO MESOJET® EXITOSO



PRECIOUS WAVE® REDENSHAPE es un gel-crema creado específicamente para:

- Facilitar un **deslizamiento** cómodo de la pieza de mano sobre la piel.
- Proporcionar una sensación envolvente y una experiencia de masaje única para el cliente gracias a su **textura especial**.
- Tonificar la piel con **principios activos** añadidos a la fórmula, que estimulan la renovación celular y la activación de los fibroblastos.

Es una crema **nutritiva e hidratante** que deja un acabado terciopelo en la piel.

Su textura especial, que con el calor se transforma en gel tras unos minutos, permite un tiempo de masaje continuo con la pieza de mano, sin necesidad de añadir más producto durante la sesión.



REDENSHAPE® CONTIENE DOS INGREDIENTES ACTIVOS:

- Una combinación de **glicógeno** y **ácido hialurónico** de bajo peso molecular. Estos dos activos actúan de manera sinérgica para tonificar y redensificar la piel.
- Un extracto de **plancton** tonificante.



LA SUPERIORIDAD DE LA COMBINACIÓN Hy-Po + RF

Gracias a numerosos años de experiencia como productor de serums antiedad y funcionales, y a una experiencia igualmente prolongada en los sistemas de hidroporación, el fabricante italiano de **MESOJET®** ha podido desarrollar protocolos específicos para combinar los tratamientos de **RADIOFRECUENCIA** y **HIDROPORACIÓN** con una eficacia comprobada.

Así, **26 modos específicos de los 91 predefinidos**, dirigidos a los protocolos combinados de radiofrecuencia + hidroporación, están incluidos en el software de **MESOJET®**.

La combinación de radiofrecuencia (RF) y hidroporación es un protocolo científicamente fundamentado que busca resultados de rejuvenecimiento profundo, eficaces y duraderos.

La barrera cutánea es renovada y reparada, las arrugas se atenúan, la edad y las manchas pigmentarias se vuelven mucho menos visibles. La piel está revitalizada hasta las capas profundas con péptidos, antioxidantes y activos antiedad eficaces.

LOS RESULTADOS DE LOS PROTOCOLOS COMBINADOS SON 30% MÁS RÁPIDOS QUE EN UNA SESIÓN DE JET POR SEPARADO, Y PERMITEN AUMENTAR EN UN 50% SU CALIDAD Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO.

La combinación de ambos tratamientos también mejora la textura de la piel, ya que, gracias al estímulo térmico de las ondas de radiofrecuencia (RF), se sintetizan proteínas de choque térmico, lo que lleva a una mejor regeneración de la piel.



La elasticidad y el tono de la piel dependen en gran medida del **nivel de agua** en la epidermis. Por esta razón, las **AQUAPORINAS**, que son canales de agua (poros) que pueden ser regulados externamente para controlar el flujo de agua hacia y desde la célula, juegan un papel tan importante.

Las ondas MESOJET® inducen corrientes en las moléculas de agua de la piel, lo que libera los enlaces de hidrógeno. Esto provoca el **agrandamiento y la multiplicación de las aquaporinas**. Gracias a este proceso, la piel será **más permeable** y podrá ser rehidratada profundamente.

Así, podrá realizar la infusión por hidroporación directamente con el mismo dispositivo, un verdadero ahorro de tiempo para obtener resultados incomparables!





LOS RESULTADOS HY-PO

Antes



Después de 1 sesión de Jet protocolo Labios.

LOS RESULTADOS RF



Antes

Después de 2 sesiones de RF. Tratamiento de la celulitis

LOS RESULTADOS Hy-Po + RF



Antes



Después de una sola sesión del protocolo combinado (Anti-Aging 3 + JET para flacidez de la piel RF).



SIN DOLOR

MESOJET® es completamente indoloro, sin agujas ni inyecciones intradérmicas. Los microchorros no invasivos penetran profundamente en la piel y el calor inducido por la pieza de mano de cerámica ofrece una experiencia totalmente cómoda, relajante y agradable.



SIN TIEMPO DE INACTIVIDAD

La administración transdérmica 100% no invasiva significa que no hay tejido cicatricial ni tiempo de inactividad social. El cliente sale del tratamiento satisfecho y en total confort, pudiendo reanudar inmediatamente sus actividades diarias.



RESULTADOS VISIBLES RÁPIDAMENTE

La administración instantánea en profundidad de principios activos poderosos en la piel gracias a la pieza de mano, o la inducción de calor emitida por la radiofrecuencia **MESOJET®**, permite obtener resultados rápidos que pueden ser observados inmediatamente al final de la primera sesión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MESOJET® Combo	
Potencia RF	Máx. 1 MHz / 140 W
Potencia Jet	7.0 bars
Piezas de mano	Hy-Po: 1 PAM Premium RF: 2 piezas de mano de cerámica: 1 rostro Bipolar - diámetro 2,9 cm 1 cuerpo Monopolar - diámetro 5 cm + 1 placa de retorno para el cuerpo
écran	10 pulgadas, táctil a color
Alimentation	230V: 50-60Hz
Dimensions	65 x 35 x 102 cm
Poids	45 kg
Consommation	550 W

CE 1370



A RECORDAR

- ▶ Una amplia gama de principios activos
- ▶ Resultados instantáneos
- ▶ Indoloro y sin tiempo de inactividad, sin agujas
- ▶ En todas las estaciones para hombres y mujeres
- ▶ 2 piezas de mano de cerámica para rostro y cuerpo
- ▶ 91 protocolos registrados
- ▶ 26 protocolos combinados
- ▶ 1 Gel crema de contacto PreciousWave®



KR LUX & Co SARL

2 rue Sangenberg
L-5850 Howald
LUXEMBURGO

+352 621 592 868
+352 661 792 510

info@krlux.lu

WWW.KRLUX.LU