




**MICRONEEDLING
PROFESSIONNEL**
Une peau Zero Défaut

CAMPOMATS
TNEED
pro

WWW.CID-GROUP.BE

FR

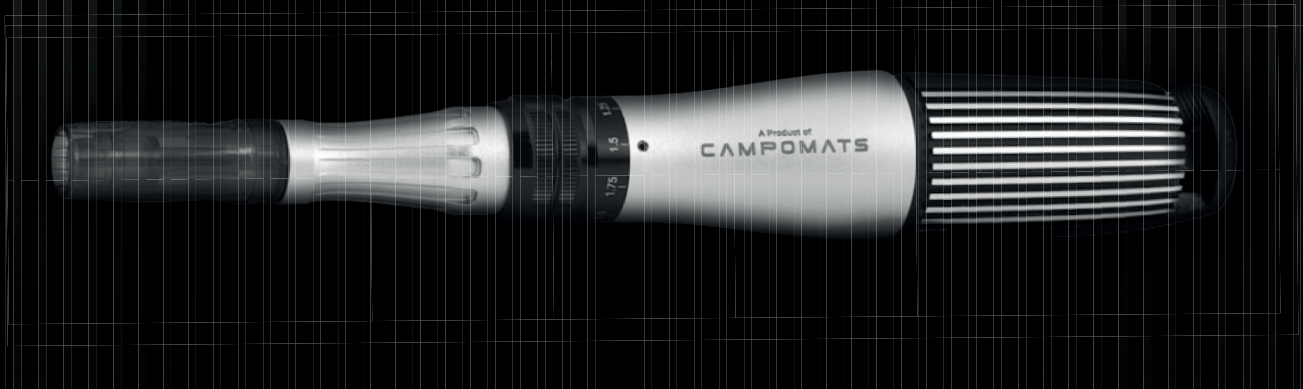

1NEED *pro*


LE FLEURON DU STYLO DERMATOLOGIQUE

1NEED® PRO by CAMPOMATS est la toute dernière innovation en matière de stylo dermatologique dédié au soin de microneedling.

Ce dispositif fabriqué en Europe permet de délivrer des soins de microneedling d'une qualité exceptionnelle et développé pour répondre à la demande grandissante des traitements anti-âge dans le domaine esthétique.

L'appareil de microneedling 1NEED® Pro by Campomats a été spécialement conçu pour une utilisation professionnelle dans le respect des mesures d'hygiène médicale.

Grâce à ses 3 cartouches de soin, le stylo dermatologique offre un large éventail d'indications - du microneedling cosmétique ou médical, au microneedling esthétique et au nanopeeling.

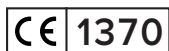

UN SEUL DISPOSITIF POUR DE MULTIPLES POSSIBILITÉS DE TRAITEMENT

Grâce à sa pièce à main en aluminium argal, à son design ergonomique, compact et à son faible poids, l'appareil offre une prise en main optimale, même pendant les traitements longs, et dispose d'une batterie au lithium de longue durée.

Pendant le traitement, il est possible de choisir entre **six vitesses d'oscillation différentes** et une **profondeur de travail allant jusqu'à 2,5 mm** pour adapter le traitement de manière optimale aux conditions de la peau.

POUR QUELLES INDICATIONS ?

- Pénétration intradermique de principes actifs (Acide hyaluronique, vitamines...)
- Raffermissment et rajeunissement de la peau (rides et ridules estompées)
- Stimulation du renouvellement cellulaire et de la production de collagène
- Lissage des imperfections
- Uniformisation et enluminement du teint
- Cicatrices d'acné, acnéomes et autres hyperpigmentations de la peau
- Aplanissement des cicatrices bombées et des chéloïdes
- Traitement des vergetures et de la peau d'orange



▣ RIDES

▣ RIDULES

▣ PORES DILATÉS

▣ PEAU UNIFORMISÉE

▣ CICATRICES D'ACNÉ

▣ RAFFERMISSEMENT

UN DISPOSITIF, 3 TECHNIQUES DE TRAITEMENT UNE SÉCURITÉ OPTIMALE



SYSTEME EASYLOCK + NO FLOW

Grâce au système **EASYLOCK**, le stylo pour la peau 1NEED® Pro assure un maintien sûr des cartouches utilisées, même lors de traitements intensifs. Ces cartouches sont également brevetées du système **NOFLOW**® évitant toute contamination entre la surface cutanée et le stylo dermatologique. Selon l'application, trois types de cartouches à usage unique et stériles sont disponibles pour assurer des conditions de traitement optimales.



1 - CARTOUCHE MICRONEEDLING

Cartouche indiquée pour les traitements par micro-aiguilles médical.

La cartouche Microneedling a été développée pour la stimulation épidermique **invasive avec saignement** et rupture des fibroblastes pour un rajeunissement cutané intense. Son design spécial avec 9 aiguilles d'une longueur maximale de 2,5 mm rend le traitement médical efficace et durable. Idéal pour les traitements de resurfacing sur les cicatrices et séquelles d'acné ou pour les rides marquées.



9MN 0.18

2 - CARTOUCHE MICROPRICKING

Cartouche indiquée pour les micro-piqûres ou les traitements par aiguilles douces **sans saignement**.

La cartouche micropricking a été développée pour une stimulation **non invasive** de l'épiderme et un rajeunissement doux de la peau. Son design spécial avec 9 aiguilles d'une longueur maximale de 0,3 mm, rend le traitement esthétique efficace et sûr. Idéal en combinaison avec des protocoles contenant substances actives de biostimulation.



9MP 0.18

3 - CARTOUCHE NANOPEELING

Cartouche indiquée pour la **microdermabrasion** et les traitements de gommage profond.

La cartouche Nanopeeling de 130 nano-points ronds a été développée pour un nettoyage intense de l'épiderme et s'utilise en combinaison avec des peelings et des substances exfoliantes actives.



130AN



1NEED *pro*



1NEED® se compose d'une pièce à main de conception ergonomique en aluminium Argal, d'un porte-pièce très utile en polymère blanc, d'un bloc d'alimentation CE.

ECRAN NUMÉRIQUE

Six vitesses de traitements sont disponibles et contrôlable via l'écran numérique : 108, 111, 115, 119, 121 et 126 coups/seconde .

MALETTE DE TRANSPORT

La pièce à main et les accessoires sont contenus dans une élégant coffret en aluminium.

Grâce à sa petite taille et sa malette de transport, 1NEED® est l'outil parfait et adapté aux petits espaces, et au travail à domicile.

BATTERIE

Grâce à sa batterie Lithium rechargeable, l'appareil peut être utilisé soit sans fil ou pendant le chargement avec un câble.

UNE GAMME DE PRODUITS DÉDIÉS

disponibles sur www.acme.shop

MOUSSE BALANCE

Pour un nettoyage de peau préalable au soin.

CM REPAIR

Pour la supplémentation cutanée par microneedling et micropricking visage.

CM REBUILD

Pour la supplémentation cutanée par microneedling et micropricking corps.

CM VITAPEEL

Pour un peeling en profondeur par nanopeeling.

BALANCING BIOMASK

Pour calmer et apaiser la peau après le microneedling.



LE SAVIEZ-VOUS?

LE MICRONEEDLING ET LE MICROPRICKING

Le microneedling et le micropricking font tous deux partie des traitements les plus appréciés dans les centres cosmétiques et les cabinets médicaux de dermatologie, car leur effet sur les troubles cutanés les plus divers est énorme. L'efficacité du traitement est particulièrement évidente pour le traitement des cicatrices d'acné, des chéloïdes, des vergetures, mais aussi pour le rajeunissement de la peau.


Le microneedling est une thérapie d'induction percutanée du collagène, au cours de laquelle la surface de la peau est perforée à l'aide d'aiguilles très fines à l'aide d'un stylo cutané. Il est ainsi possible de faire pénétrer de précieux principes actifs plus profondément dans la peau et de stimuler le renouvellement cutané. Il est possible d'adapter l'intensité à l'état de la peau. On distingue les trois applications suivantes : le microneedling cosmétique, dermatologique et chirurgical. Elles se distinguent spécialement par la profondeur de pénétration réglée des aiguilles et par leur indication. Alors que le needling cosmétique (micropricking) est plutôt utilisé pour faire pénétrer des substances actives dans la peau et affiner le grain de peau, le needling médical et le needling chirurgical font partie des variantes plus intensives et sont principalement utilisés pour le traitement des cicatrices et le raffermissement de la peau.

POUR QUELS RÉSULTATS?



NANOPEELING

Taches pigmentaires

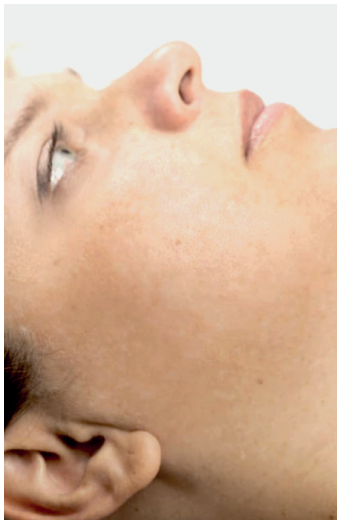

Séquelles d'acné



MICROPRICKING



MICRONEEDLING

Anti-âge



1NEED
pro

Vitiligo



MICRONEEDLING

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1NEED[®]

pro

1NEED [®] by Compomats	
Composition	1 stylo dermatologique en Aluminium Argal
Alimentation	Batterie Lithium rechargeable 5V
Vitesses	6 vitesses réglables : 108, 111, 115, 119, 121 et 126 coups/seconde
Profondeur	Double Bague de réglage : 0-2,5mm et 0-0,3mm
Écran	digital numérique
Accessoires	socle en polymer blanc, malette de transport
Alimentation	100-240V : 50-60Hz : 0,3A
Dimensions	Stylo : 145mm x 20mm Malette : 170mm x 190mm x 70mm



certification IIb

CE 1370

Cartouches de traitement individuelles stériles			
Variante	MICRONEEDLING 9MN 0,18	MICROPICKING 9MP 0,18	NANOPEELING 130 AN
Profondeur	2,5 mm	0,3 mm	-
Indication	Idéal pour les traitements de microneedling invasifs avec saignement	Parfait pour les traitements de micropicking ou de soft-needling sans saignement	Pour la microdermabrasion et le peeling profond

FORMATION

Une formation sur le dispositif vous sera dispensée par notre formatrice agréée. Cette formation est validée par un certificat reconnu par le public et les compagnies d'assurances.

Notre formatrice se tient à votre disposition sur rendez-vous dans notre showroom afin de répondre à vos questions ou de vous proposer une session de formation complémentaire.




COMMUNICATION

Votre dispositif vous sera livré avec une Affiche format A2 (42x60cm) et ses flyers clients.

Retrouvez toutes les actualités sur nos réseaux sociaux facebook et Instagram et faites parler de vous et de votre expérience avec le 1NEED[®] #1need



@cidgroup.be

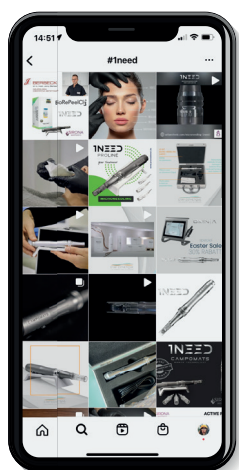

CAMPOMATS

INeed

pro



L'efficacité d'un concept global

Un accompagnement professionnel d'experts

Une équipe dynamique et réactive basée en Belgique

Des produits novateurs alliant performance et simplicité d'utilisation

Un programme de formations adapté à votre évolution

Des outils de communication pour développer votre activité

Découvrez notre gamme complète sur WWW.CID-GROUP.BE



Chaussée d'Alsemberg, 842
1180 Uccle - BELGIQUE
tél : +32(0)2/374.03.39
mail : contact@cid-group.be
WWW.CID-GROUP.BE



[@cidgroup.be](http://cidgroup.be)



Esthetic
Technology