

HYDROPORATION & RADIOFRÉQUENCE

VISAGE & CORPS





MESOJET® est un dispositif fabriqué en Europe permettant de délivrer des soins de la peau d'une qualité exceptionnelle et développé pour répondre à la demande grandissante des traitements anti-âge dans le domaine esthétique. Découvrez aujourd'hui les meilleures technologies de supplémentation cutanée et de radiofréquence réunies dans cette gamme de dispositifs.



CE 1370

PORES LISSÉS

PEAU RAFFERMIE

RIDES ESTOMPÉES

CELLULITE ÉLIMINÉE

LÈVRES REDESSINÉES



2 TECHNOLOGIES - 1 DISPOSITIF



HYDROPORATION

Grâce à sa technologie **d'hydroporation** ce dispositif permet la pratique d'un soin complet de réjuvenation cutanée par exfoliation et **supplémentation transcutanée** de principes actifs.

Avec sa pièce à main dernière génération et une large gamme de principes actifs, vous obtiendrez des résultats anti-âge visibles ainsi qu'une amélioration de la texture et de la qualité de la peau.

RADIOFRÉQUENCE

Grâce à sa technologie **de Radiofréquence monopolaire & bipolaire**, ce dispositif permet la pratique d'un soin de raffermisssement cutané pour le visage et le corps.

Avec ses 2 pièces à main en céramique et ses plaques pour le corps vous obtiendrez des résultats sur les peaux relâchées et même la cellulite.

Au travers d'un soin des plus agréables (comparable à un massage aux pierres chaudes) vous obtiendrez des résultats visibles sur la remise en tension cutanée et la texture de la peau.



It's a Match!

Par rapport à un traitement d'hydroporation ou de radiofréquence seul, la combinaison de l'hydroporation et de la radiofréquence fournit un résultat

30% PLUS RAPIDE

et accroît de

**50% LA QUALITÉ ET DURABILITÉ
À LONG TERME**




L'HYDROPORATION

Supplémentation cutanée sans aiguille

À l'aide d'une **pièce à main brevetée**, le dispositif **MESOJET®** va propulser à une vitesse supersonique (>200 m/s), un mélange d'air et de solution active sous la forme d'un jet de gouttelettes microscopiques et ce, **sans AUCUN CONTACT avec la peau**.


Une séance **MESOJET®** consiste en un **traitement complet de la zone à traiter** (visage, décolleté, corps). En fonction de l'inclinaison de la pièce à main et de sa distance à la peau, on pourra :

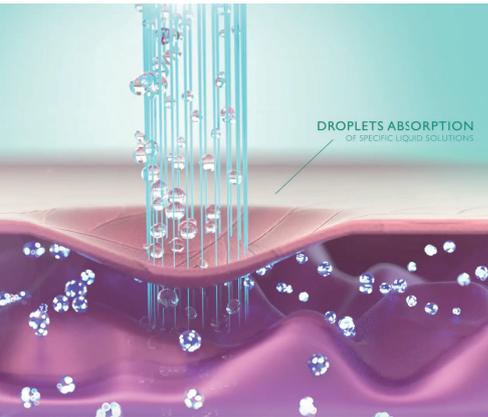

- Dans un **1^{er} temps**, procéder à un **drainage lymphatique** pour relancer la circulation
- Puis dans un **2nd temps** **exfolier** les couches superficielles de la peau et éliminer les cellules mortes : **Hydro-dermabrasion**
- Et dans un **3^{ème} temps**, engendrer une pression statique locale sur la peau, où **le principe actif pénétrera** alors jusqu'à plusieurs millimètres jusqu'au derme : c'est la **supplémentation cutanée** ou **hydroporation**.

Ce processus, appelé "Barophorèse" est le résultat de la variation de pression exercée sur la peau.

Il garantit un accès sans aiguille aux couches profondes de la peau et facilite l'apport de nutriments tels que **l'acide hyaluronique**, qui peut atteindre les tissus conjonctifs, ou les **vitamines A, B, C et E** importantes pour le bon fonctionnement des cellules.

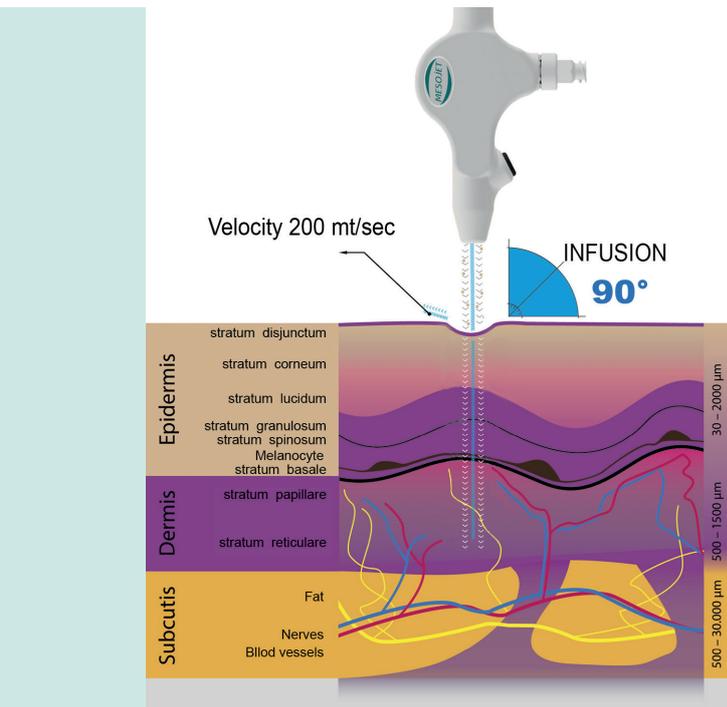

La "Barophorèse"

Le jet supersonique va générer un flux sous haute pression au point de contact avec la peau créant **l'ouverture de micro-canaux** dans l'épiderme.

La différence de pression entre la surface et les tissus inférieurs, va provoquer une **pénétration profonde et une diffusion transdermique** des substances biologiques.

L'allègement de la pression va refermer les micro-canaux et **maintenir les principes actifs** durablement dans les tissus, pour des **effets physiologiques à long terme**.

HYDRO-DERMABRASION

PEELING CHIMIQUE

INFUSION TRANSDERMIQUE

BIO-REJUVENATION



UNE LARGE GAMME DE PRINCIPES ACTIFS Adaptée à la diversité cutanée

En fonction du protocole et/ou du résultat souhaité, différentes formules de principes actifs sont disponibles.

L'une des caractéristiques principales du **MESOJET®** est la capacité de transmettre en profondeur des substances utiles pour le rajeunissement de la peau. Ces formules sont enrichies en **nutriments, vitamines et minéraux** indispensables à l'élasticité, l'éclat, le rajeunissement et la beauté de la peau.

Le praticien dispose de produits de haute concentration, expressément conçus pour être administrés par la pièce à main **PREMIUM** du **MESOJET®**. Enrichies avec les plus puissants actifs anti-âge du marché, les solutions '**Jet Solution**' garantissent des résultats ciblés selon les protocoles de traitement.

Les consommables qui vous sont proposés vous permettent d'effectuer tous les protocoles **MESOJET®** : Anti-âge visage et corps, acné, couperose, dépigmentation et soin du cuir chevelu.



UNE PIÈCE À MAIN

Adaptée aux protocoles de soins

LA PIÈCE À MAIN PREMIUM

Permet d'effectuer tous les soins :

- Meilleure micronisation : particules plus fines et moins d'air pour une pression identique et des meilleurs résultats
- Jet plus homogène,
- Puissance réglable,
- Ne se bouche pas et ne diminue pas en efficacité au fil des soins
- Pas d'éléments métalliques contondants = pas de risque de blessure
- Nettoyage rapide et facile de la pièce à main
- Plus de gaspillage de plastique !




DÉBIT RÉGLABLE MANUELLEMENT



FIN



MOYEN

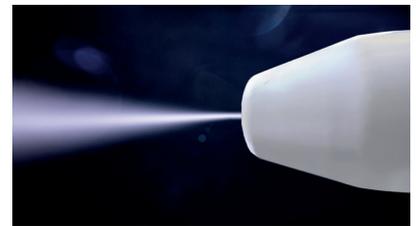

FORT

DES PROTOCOLES DE SOINS en plusieurs étapes



ETAPE
01

DRAINAGE LYMPHATIQUE

Un massage agréable et relaxant utile pour détoxifier la peau et stimuler la microcirculation.

ETAPE
02

HYDRO-DERMABRASION

Elimination des cellules mortes prépare la peau à recevoir les nutriments lors de la phase d'hydroporation.

ETAPE
03

HYDROPORATION

Permet une diffusion efficace et profonde des ingrédients actifs dans la peau.

ETAPE
04

BOOSTER INFUSION


Etape facultative peut être incluse pour améliorer et prolonger le résultat du traitement.



LA RADIOFRÉQUENCE au service de l'anti-âge

La radiofréquence du **MESOJET®** a été développée avec des réglages spécifiques qui génèrent un **échauffement contrôlé de la bicouche lipidique** permettant à la barrière cutanée de devenir plus perméable aux substances lipolytiques et hydrophiles.

Traitée de cette manière, **la peau est capable de beaucoup mieux absorber les principes actifs** que l'opérateur choisit de délivrer.

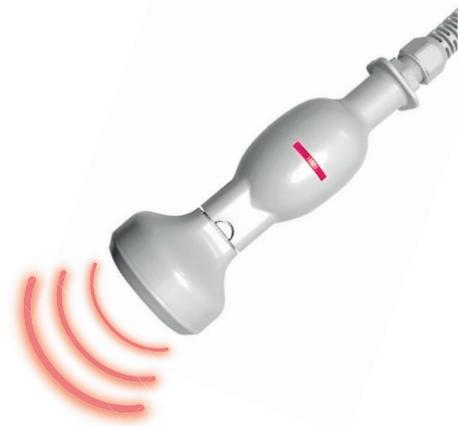

LES INDICATIONS

1 Le dispositif **MESOJET®** procure un soin agréable et indolore délivrant une chaleur douce grâce à sa radiofréquence. Vous pourrez ainsi traiter :

- Les rides et ridules (anti-aging)
- Les vergetures et cicatrices
- L'élimination de la peau d'orange
- Le raffermissment de la peau
- L'amélioration de la texture cutanée


2 Utilisé sur le visage, **MESOJET®** permet d'en **redessiner les contours et d'améliorer la texture cutanée**. La chaleur induite par l'onde génère un **effet tenseur** instantané et durable, redonnant à la peau un aspect visiblement plus jeune.

3 Avec ses **91 modes de traitements prédéfinis** pour le visage et le corps et ses 2 pièces à main en céramique, traitez un maximum d'indications pour des résultats visibles et durables.



LES PIÈCES À MAIN


Le dispositif **MESOJET®** dispose de **deux pièces à main en céramique**. Ergonomiques, légères et faciles d'utilisation, elles vous permettent de traiter le visage ou le corps avec une conductivité optimale et de réaliser des séances à la fois **sûres, confortables et efficaces**.

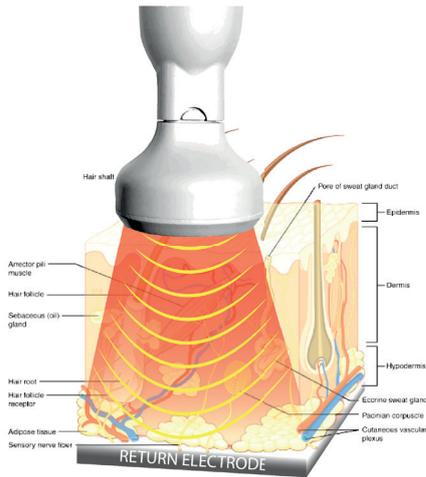

MONOPOLAIRE CAPACITIVE

pour le traitement du **CORPS**
(Puissance max. 1Mhz)

- Relâchement cutané
- Cellulite et amas adipeux
- Vergetures et cicatrices

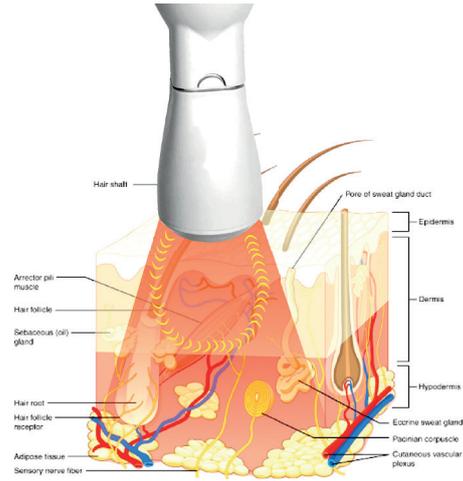

BIPOLAIRE

pour le traitement du **VISAGE**
(Puissance max. 1Mhz)

- Relâchement cutané
- Raffermissment de la peau
- Anti-rides
- Amélioration de la texture de la peau

REDENSHAPE® la crème Conductrice RF



L'INDISPENSABLE POUR UN TRAITEMENT MESOJET® RÉUSSI

PRECIOUS WAVE® REDENSHAPE est un gel crème créé spécifiquement pour :

- Permettre un **mouvement confortable** de la pièce à main sur la peau,
- Prodiguer un enveloppement agréable et fournir une expérience unique de massage pour le client grâce à sa **texture particulière**.
- Obtenir une peau tonique grâce à des **principes actifs**, ajoutés à la formule, qui ciblent le renouvellement cellulaire et la stimulation des fibroblastes.

C'est une **crème nourrissante et hydratante**, laissant un fini velours sur la peau.

Sa texture particulière, qui après quelques minutes, avec la chaleur, se transforme en gel, permet un temps de massage continu avec la pièce à main, sans avoir besoin d'ajouter du produit pendant la séance.



REDENSHAPE® contient deux INGRÉDIENTS ACTIFS :

- Une combinaison de **glycogène** et d'**acide hyaluronique** de bas poids moléculaire. Ces deux actifs agissent de manière synergique pour tonifier et redensifier la peau.
- Un extrait de **plancton** tonifiant.



LA SUPÉRIORITÉ DU COMBINÉ Hy-Po + RF

Grâce à de nombreuses années en tant que producteur de SÉRUMS anti-âge et fonctionnels, et à une expérience tout aussi longue sur les systèmes d'hydroporation, le fabricant Italien du **MESOJET®** a pu développer des protocoles spécifiques pour combiner les traitements de **RADIOFREQUENCE** et d'**HYDROPORATION** d'une efficacité prouvée.

Ainsi, **26 modes spécifiques sur les 91 prédéfinis** ciblant les protocoles combinés radiofréquence + hydroporation sont inclus dans le logiciel **MESOJET®**.

La combinaison de RF et d'hydroporation est un protocole scientifiquement fondé qui cible des résultats de rajeunissement profonds, efficaces et durables.

La barrière cutanée est renouvelée et réparée, les rides sont atténuées, l'âge et les taches pigmentaires sont beaucoup moins visibles. La peau est boostée, jusqu'à la couche profonde, avec des peptides, des antioxydants et des actifs anti-âge efficaces.

LES RÉSULTATS DES PROTOCOLES COMBINÉS SONT 30% PLUS RAPIDES QUE LORS D'UNE SÉANCE DE JET SEULE, ET PERMETTENT D'ACCROÎTRE DE 50% LEUR QUALITÉ ET DURABILITÉ À LONG TERME.

La combinaison des deux traitements améliore également la texture de la peau, car grâce au stimulus thermique des ondes RF, des protéines de choc thermique sont synthétisées entraînant une meilleure régénération de la peau.



L'élasticité et le tonus de la peau dépendent beaucoup du **niveau d'eau dans l'épiderme**. C'est la raison pour laquelle les **AQUAPORINES** - des canaux d'eau (pores) qui peuvent être régulés de manière externe pour contrôler le débit d'eau vers et depuis la cellule - jouent un rôle si important.

Les ondes **MESOJET®** induisent des courants dans les molécules d'eau de la peau, relâchant ainsi les liaisons Hydrogène. Cela entraîne **l'agrandissement et la multiplication des aquaporines**.

Grâce à ce processus la peau sera **plus perméable** et pourra être ré-hydratée en profondeur.

Vous pourrez ainsi procéder à l'infusion par hydroproration directement avec le même dispositif - un vrai gain de temps pour des résultats incomparables!





LES RÉSULTATS Hy-Po

Avant



Après 1 séance Jet protocole Lèvres

LES RÉSULTATS RF



Avant

Après 2 séances RF
'Traitement CELLULITE '

LES RÉSULTATS Hy-Po + RF



Avant



Après 1 seule séance protocole combiné
(Anti-Aging 3 + JET for Skin Laxity RF)



SANS DOULEUR

MESOJET® est totalement indolore, sans aiguille ni injection intradermique. Les micro-jets non-invasifs pénètrent profondément dans la peau et la chaleur induite par la pièce à main céramique offre une expérience totalement confortable, relaxante et agréable.



PAS DE TEMPS D'ÉVICTION

L'administration transdermique 100% non-invasive signifie qu'il n'y a pas de tissu cicatriciel ni de temps d'éviction sociale. Le client quitte le traitement satisfait dans le plus grand confort et peut immédiatement reprendre ses activités quotidiennes.



RÉSULTATS VISIBLES RAPIDEMENT

L'administration instantanée en profondeur dans la peau de principes actifs puissants grâce à la pièce à main, ou l'induction de chaleur émise par la Radiofréquence MESOJET® permet d'obtenir des résultats rapides qui peuvent être observés immédiatement dès la fin de la 1^{ère} séance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MESOJET® Combo	
Puissance RF	Max. 1 MHz / 140 W
Puissance Jet	7.0 bars
Pièces à main	Hy-Po : 1 PAM Premium RF : 2 pièces à main en céramique : 1 visage Bipolaire - diam. 2,9 cm 1 corps Monopolaire - diam. 5 cm + 1 plaque de retour corps
écran	10 pouces, tactile couleur
Alimentation	230V : 50-60Hz
Dimensions	65 x 35 x 102 cm
Poids	45 kg
Consommation	550 W



À RETENIR

- ▶ Une large gamme de principes actifs
- ▶ Résultats Instantanés
- ▶ Indolore et sans éviction sans aiguille
- ▶ En toute saison pour hommes & femmes
- ▶ 2 pièces à main céramique visage et corps
- ▶ 91 protocoles enregistrés
- ▶ 26 protocoles combinés
- ▶ 1 Gel crème de contact PreciousWave®



Chaussée d'Alseberg, 842
1180 Uccle - BELGIQUE
tél : +32(0)2/374.03.39
mail : contact@cid-group.be
WWW.CID-GROUP.BE